



Ultra Pico

ULTRA SHOT & SUPER ENERGY


---


# Ultra Pico

## ULTRA SHOT & SUPER ENERGY

### ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το υψηλής ισχύος λέιζερ Active Q-Switch Nd:YAG με το εξαιρετικά μικρό πλάτος παλμού 2 nsec, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αφαίρεση της φυσικής ή τεχνητής μελάγχρωσης, η ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από τα χρωμοφόρα στο δέρμα, με αποτέλεσμα φωτοακουστικό εφέ που κατακεραματίζει τη χρωστική ουσία, διατηρώντας ανέπαφο τον περιβάλλοντα ιστό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επακόλουθη εξασθένιση και καθαρισμό της χρωστικής λόγω της απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.

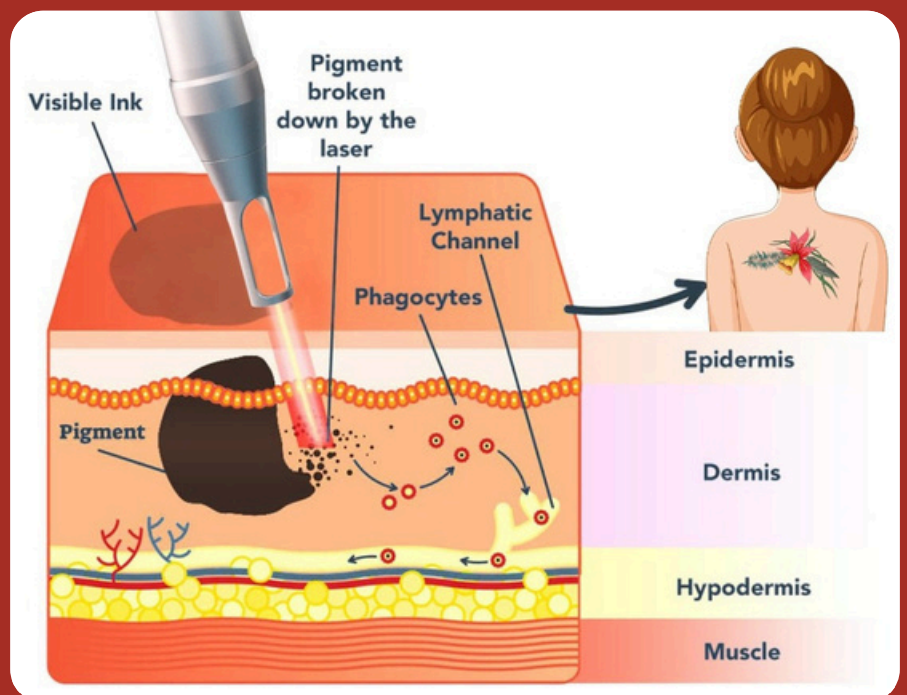

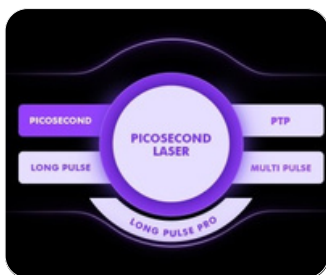


### 01/ Πέντε τρόποι θεραπείας

Πέντε διαθέσιμοι τρόποι θεραπείας, πάντα το καταλληλότερο εύρος παλμού και η πιο κατάλληλη απόδοση ενέργειας για κάθε είδους ενδείξεις, φέρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα και τον συντομότερο χρόνο αποκατάστασης!!



### 02/ Ενσωματωμένη κλινική βάση δεδομένων

Η ενσωματωμένη κλινική βάση δεδομένων από πάνω από 70.000 σετ Pico Qswitch yag Laser που πωλούνται φέρνει πάντα τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συστάσεις παραμέτρων για αναφορά, καθιστώντας ευκολότερο ακόμα και για νέους αρχάριους να ξεκινήσουν!!

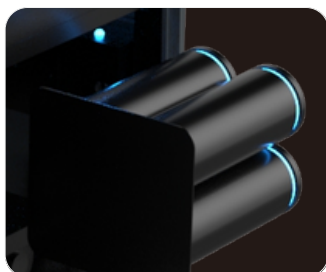


### 03/ Ενσωματωμένο τροφοδοτικό και 4 λειτουργούν ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου

Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και οι 4 πυκνωτές όχι μόνο εξασφαλίζουν την υψηλότερη, την πιο σταθερή ισχύ εξόδου, αλλά αποτελούν επίσης βασικό σημείο για τον εντοπισμό του πραγματικού λέιζερ Pico Qswitch yag (οι περισσότεροι άλλοι ανταγωνιστές έχουν μόνο έναν πυκνωτή)!!



### 04/ Ευκολία συντήρησης

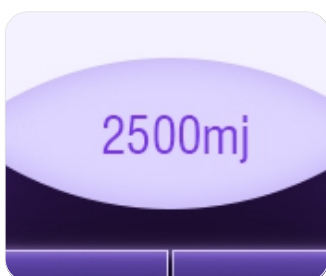


### 05/ Η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Σε LONG PULSE, η ενέργεια είναι 2500mj. Σε picosecond, η ενέργεια είναι 800mj.



### 06/ Interlock

Η Κορέα είναι η πρώτη που εισήγαγε το Interlock, δημιουργώντας ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας για τους πελάτες.

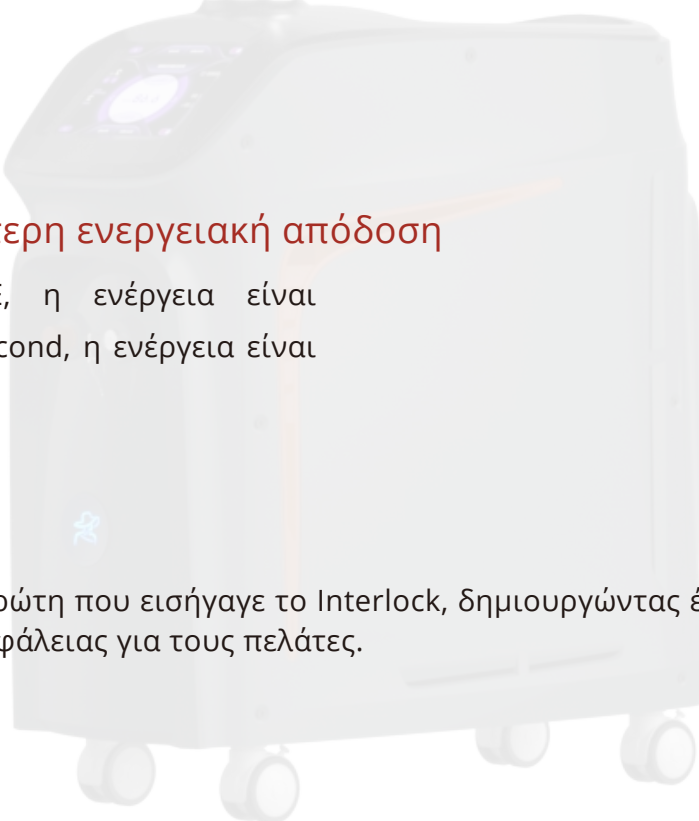

# Ultra Pico

## ULTRA SHOT & SUPER ENERGY



Freckle removal



Hair removal



Acne clearance



Improve varicose veins



Facial rejuvenation



Onychomycosis



Tattoos removal



**Μικρός χρόνος παλμού,  
Ισχυρή στιγμιαία ενέργεια**

Πραγματικά εξαιρετικά μικροσπλάτος παλμού, πιο έντονη ανατίναξη της χρωστικής, χωρίς θερμότητα, χωρίς βλάβη στο δέρμα, μετατρέπει αμέσως τη χρωστική ουσία σε σκόνη, γρήγορο μεταβολισμό.



**Πολλαπλά μήκη κύματος /  
Ολοκληρωμένη**

Καλύπτει πλήρως όλες τις βαθιές επίμονες χρωστικές ουσίες και τις καλοήθειες μελαγχρωματικές βλάβες, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος, αντιμετωπίζουν διάφορα δερματικά προβλήματα.

**Ακριβής**




Η εξαιρετική τεχνολογική καινοτομία, η 100% εστιασμένη ενέργεια μπορεί να ελέγξει με ακρίβεια το βάθος και την ενέργεια της επεξεργασίας.



# Ultra Pico

## ULTRA SHOT & SUPER ENERGY

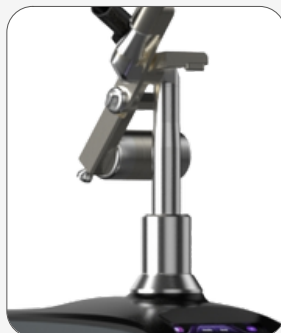

- Customized Korean Seven-Joint Arm
- Βραχίονας οδηγός φωτός υψηλής κίνησης: ρυθμός απώλειας ενέργειας  $\leq 8\%$
- Πολυτελές σχέδιο
- Ελεύθερη περιστροφή 360°, εξασφαλίζει σταθερή ενέργεια λέιζερ

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

### PICOSECOND

Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα σημεία, σημάδια ή τατουάζ, θεραπεία αναζωογόνησης δέρματος, τατουάζ!

### PTP

Moles, τατουάζ, μαύροι κύκλοι ματιών, πόροι, υπερμελάγχρωση


### MULTI PULSE

Χλόασμα, Επίμονος λεκές και

χρωστικές

### LONG PULSE & LONG PULSE Pro


Αγγειακά, Ακμή, Ροδόχρους ακμή/διάφορη ερυθρότητα, Ουλοχονοκητίαση, Αναζωογόνηση δέρματος, σύσφιξη, Λεύκανση δέρματος, συρρίκνωση των πόρων, Αφαίρεση ρυτίδων, Αποτρίχωση, Λεύκανση μαλλιών κ.λπ.

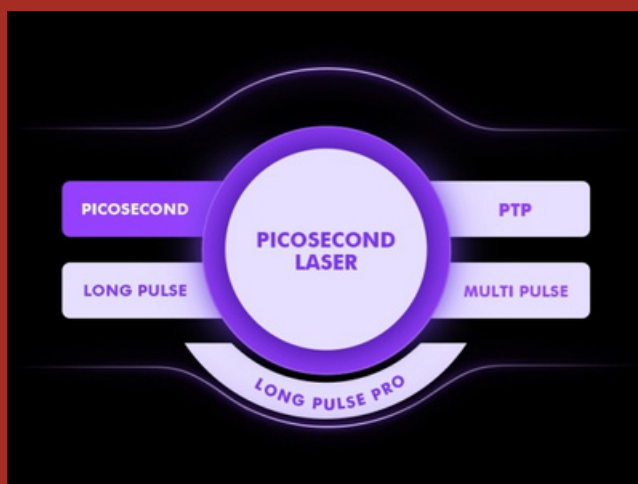


Acne Scars



depressed scarring

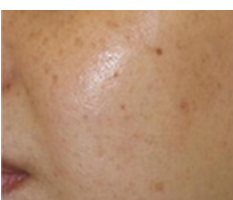


dull skin

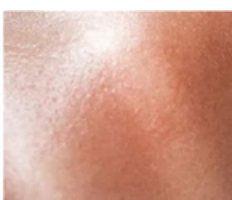

uneven skin tone



lack of collagen

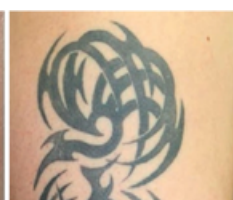

stubborn tattoos


Standard applicator: Focusing head

3 wavelength in 1 : 1064nm, 532nm, 755nm




Standard applicator: Honeycomb head

2 wavelength in 1: 755nm, 1064nm

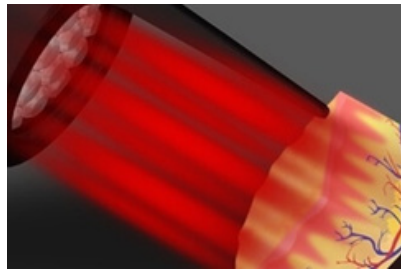

## Before and After

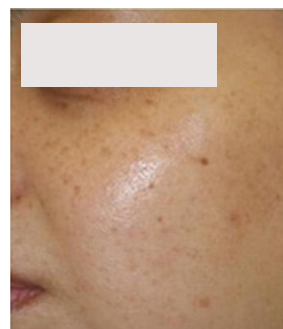

# Ultra Picoliris

## ULTRA SHOT & SUPER ENERGY

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Laser Type	Nd:YAG				
Pulse width	Picosecond mode		450ps		
	LP mode		300US		
Beam profile	Flat-top mode				
Wavelength	1064nm,532nm,755nm				
Treatment modes	Picosecond / PTP / Multi pulse / Long pulse / Long pulse Pro				
Pulse energy	1064NM/755nm	Model	Minimum	Maximum	Stepping
		Picosecond	100mj	800mj	50mj
		PTP	100mj	1200mj	50mj
		Multi Pulse	100mj	1500mj	50mj
		Long Pulse	200mj	2500mj	100mj
		Long Pulse Pro	200mj	5000mj	100mj
	532NM	Picosecond	50mj	400mj	25mj
		PTP	50mj	600mj	25mj
		Multi Pulse	50mj	750mj	25mj
		Long Pulse	/	/	/
Long Pulse Pro		/	/	/	
Spot size	2-10mm Adjustable				
Aiming beam	Diode 650nm<5mw (Red)				
Repetition rate	1-10HZ adjustable				
Package dimension and weight	100*53*115cm (101KG) 21*44*106 (13KG)				
Power supply	AC110V/230V, 50/60HZ				